


相関性


セラテストム/大型機相関

項目 : γ -GTP
 装置 : 日立臨床分析装置
 試薬名 : セラテストム GGT
 単位 : U/L

差のプロット(Xに対するY-X)

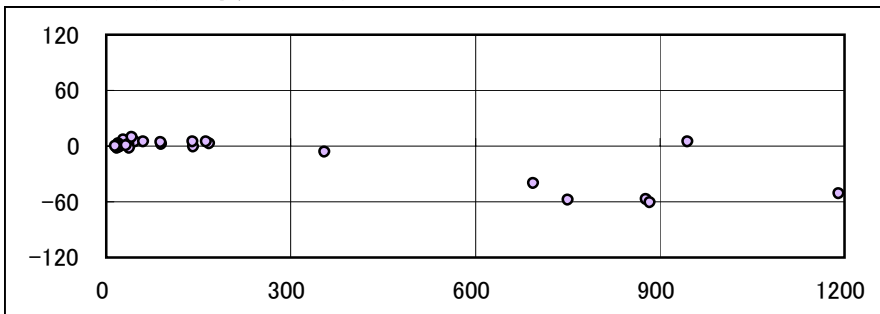

散布図

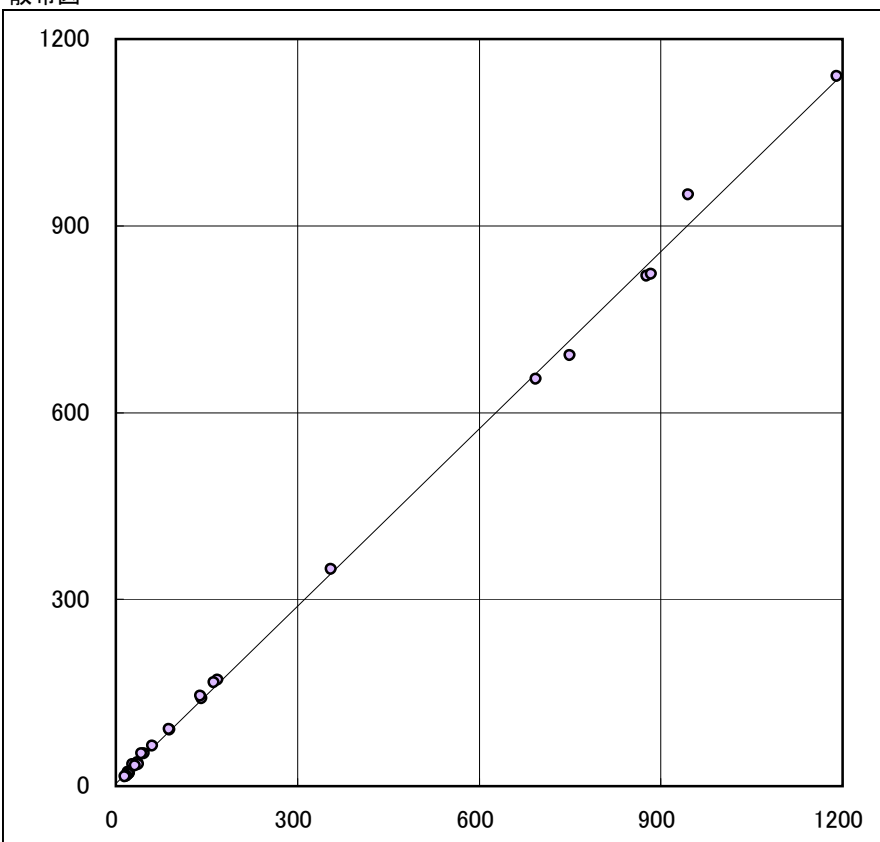

試料 血清

X軸	
装置	日立自動分析装置
メーカー	A社
項目	γ -GTP
試薬名	-
単位	U/L

Y軸	
装置	日立臨床分析装置
メーカー	日立化成工業(株)
項目	γ -GTP
試薬名	セラテストム GGT
単位	U/L

n = 29

r = 0.999

Y = aX + b
 傾き a 0.950 切片 b 4.426

X平均 = 239.2

Y平均 = 231.6

Sy·x = 12.60

式選択 直線回帰式

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	47	52	20	21						
2	142	141	19	19						
3	60	65	22	21						
4	168	171	21	20						
5	28	35	18	16						
6	89	91	17	16						
7	36	38	37	35						
8	162	167	32	33						
9	42	52	15	15						
10	88	92								
11	140	145								
12	877	820								
13	750	692								
14	694	654								
15	355	349								
16	884	823								
17	945	950								
18	1191	1140								
19	20	23								
20	19	20								

備考