


相関性


セラテストム/大型機相関

項目 : LD
 装置 : 日立臨床分析装置
 試薬名 : セラテストム LD
 単位 : U/L

差のプロット(Xに対するY-X)

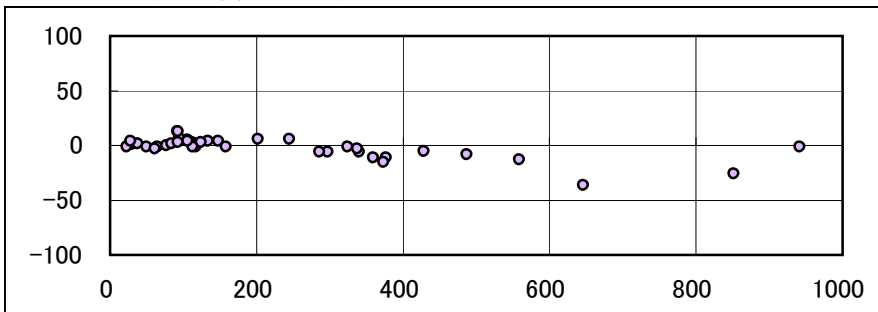

散布図

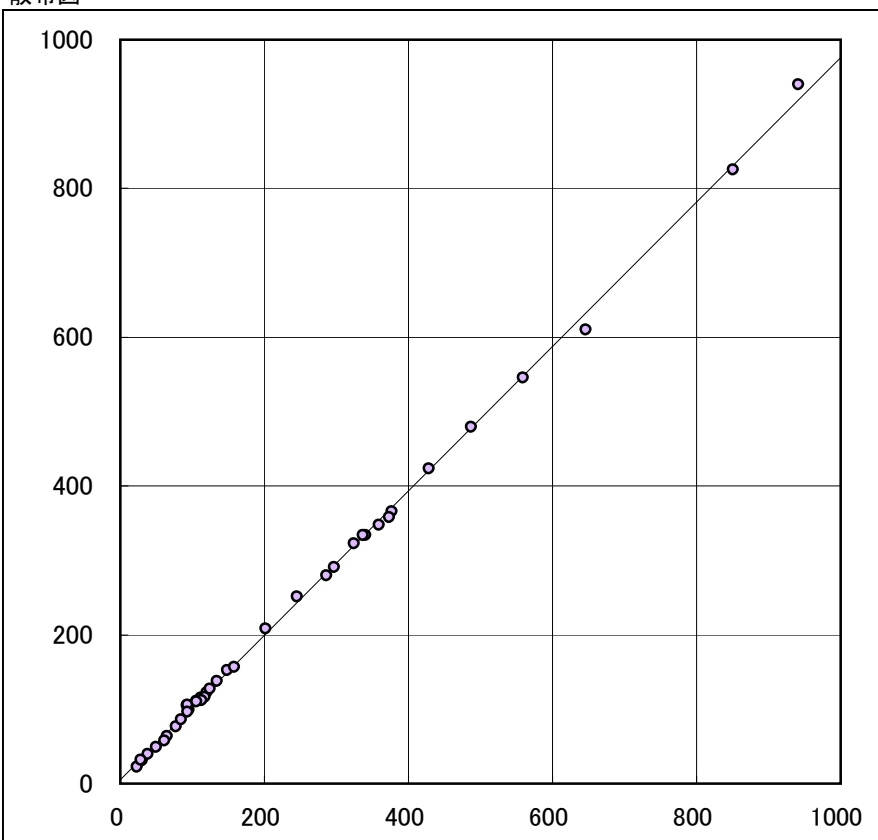

試料 血清

X軸	
装置	日立自動分析装置
メーカー	A社
項目	LD
試薬名	-
単位	U/L

Y軸	
装置	日立臨床分析装置
メーカー	日立化成工業(株)
項目	LD
試薬名	セラテストム LD
単位	U/L

n = 40

r = 1.000

Y = aX + b
 傾き a 0.971 切片 b 4.931

X平均 = 230.3

Y平均 = 228.6

Sy·x = 6.72

式選択 直線回帰式

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	50	49	120	122						
2	65	64	324	323						
3	61	58	134	138						
4	77	77	377	366						
5	30	31	148	152						
6	23	22	359	348						
7	38	40	117	116						
8	28	32	158	157						
9	340	334	373	358						
10	297	291	124	127						
11	286	280	95	99						
12	245	251	106	111						
13	941	940	94	101						
14	851	825	84	86						
15	646	610	92	105						
16	559	546	113	112						
17	487	479	93	106						
18	428	423	202	208						
19	112	115	106	110						
20	337	334	93	96						

備考