


相関性


セラテストム/大型機相関

項目 : **AMY**
 装置 : 日立臨床分析装置
 試薬名 : セラテストム AMY
 単位 : U/L

差のプロット(Xに対するY-X)

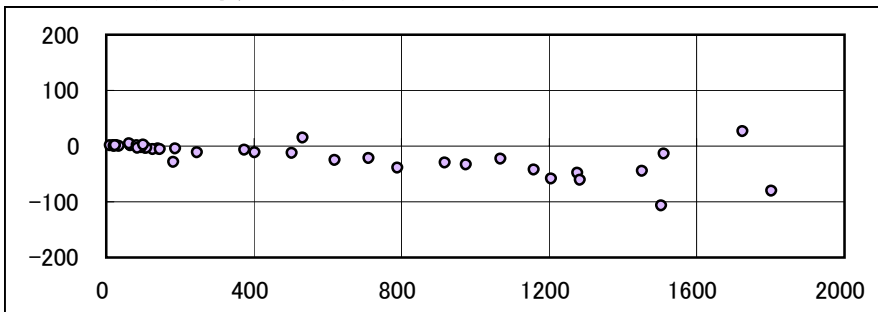

散布図

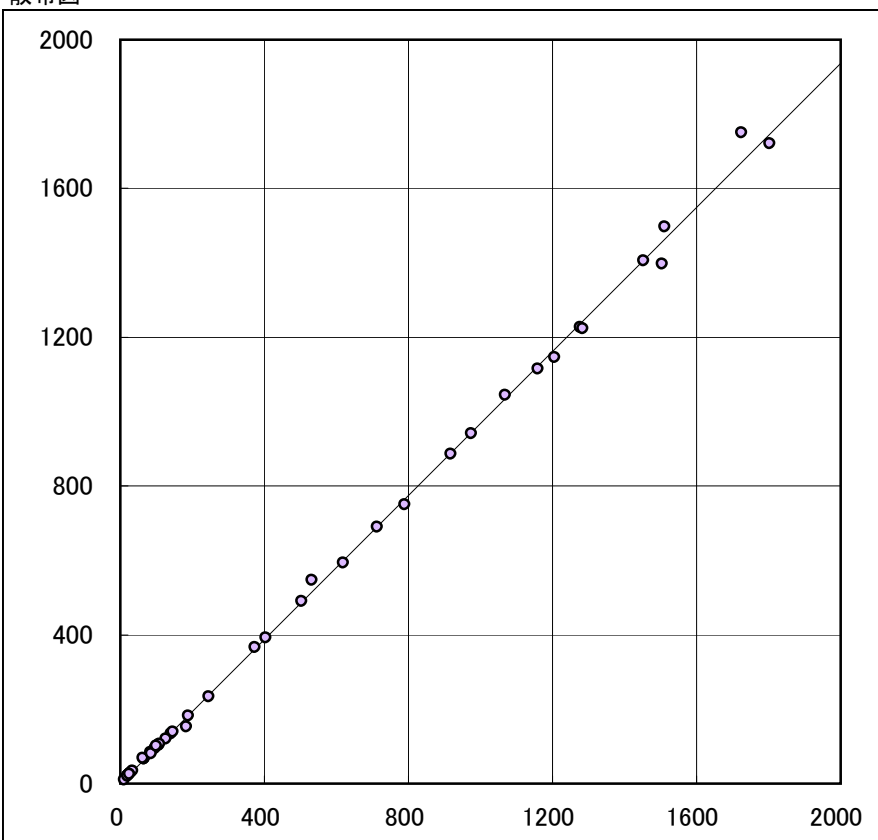

試料 血清

X軸	
装置	日立自動分析装置
メーカー	B社
項目	AMY
試薬名	—
単位	U/L

Y軸	
装置	日立臨床分析装置
メーカー	日立化成工業(株)
項目	AMY
試薬名	セラテストム AMY
単位	U/L

n = **43**

r = **0.999**

Y = aX + b
 傾き a **0.968** 切片 b **0.501**

X平均 = **509.3**

Y平均 = **493.5**

Sy·x = **18.99**

式選択 直線回帰式

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	66	67	188	183	917	887				
2	65	67	403	392	790	751				
3	140	135	100	102	712	690				
4	126	120	246	234						
5	1276	1228	22	23						
6	1724	1750	28	29						
7	63	68	34	34						
8	83	84	24	25						
9	104	103	20	21						
10	183	154	10	11						
11	106	103	20	20						
12	374	367	25	26						
13	109	106	1504	1397						
14	619	594	1284	1223						
15	96	94	1159	1116						
16	1206	1147	974	941						
17	146	140	1803	1722						
18	532	547	1511	1497						
19	85	81	1452	1407						
20	503	490	1068	1045						

備考