


相関性


セラテストム/大型機相関

項目 : CK
 装置 : 日立臨床分析装置
 試薬名 : セラテストム CK
 単位 : U/L

差のプロット(Xに対するY-X)

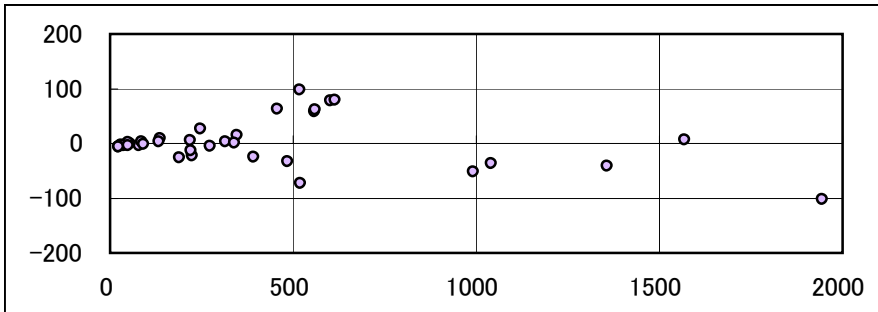

散布図

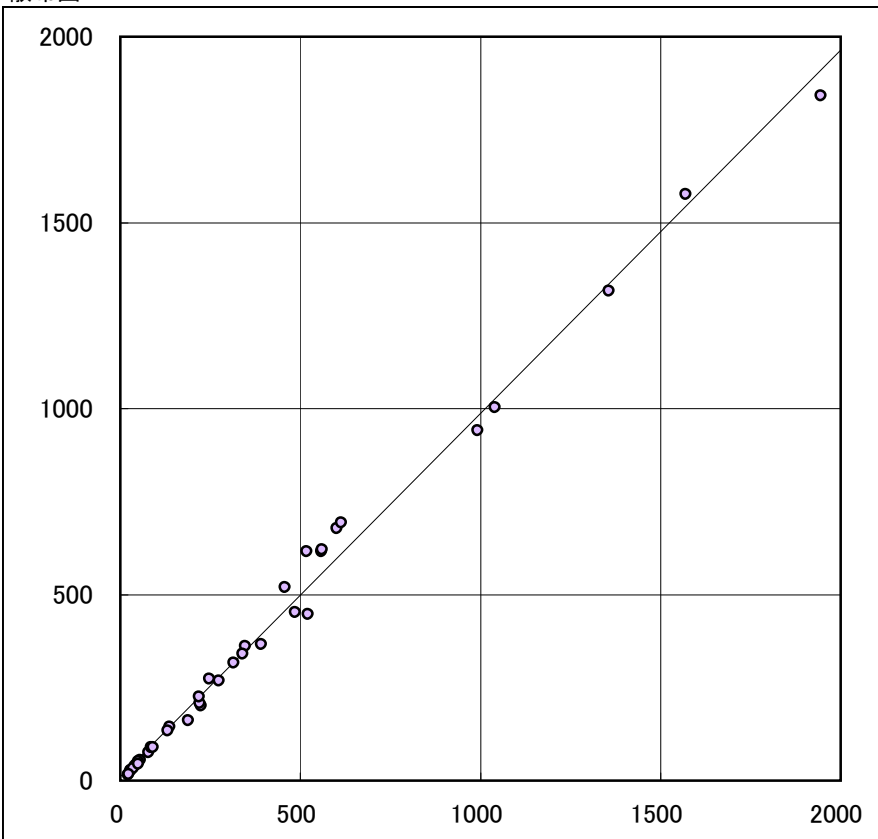

試料 血清

X軸	
装置	日立自動分析装置
メーカー	B社
項目	CK
試薬名	-
単位	U/L

Y軸	
装置	日立臨床分析装置
メーカー	日立化成工業(株)
項目	CK
試薬名	セラテストム CK
単位	U/L

n = 38

r = 0.996

Y = aX + b
 傾き a = 0.977 切片 b = 10.407

X平均 = 391.6

Y平均 = 393.1

Sy·x = 38.95

式選択 直線回帰式

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	188	162	136	145						
2	224	202	457	520						
3	221	208	132	135						
4	273	268	340	341						
5	1040	1004	41	39						
6	520	448	47	45						
7	485	452	49	51						
8	391	366	29	27						
9	992	941	29	25						
10	1357	1316	22	16						
11	1569	1576	36	33						
12	1944	1842	23	17						
13	79	75	614	693						
14	314	317	558	616						
15	86	90	518	616						
16	55	55	560	622						
17	91	90	219	225						
18	247	274	49	45						
19	601	679								
20	346	361								

備考