


相関性


セラテストム/大型機相関

項目 : T-BIL
 装置 : 日立クリニカルアナライザー
 試薬名 : セラテストム BIL
 単位 : mg/dL

差のプロット(Xに対するY-X)

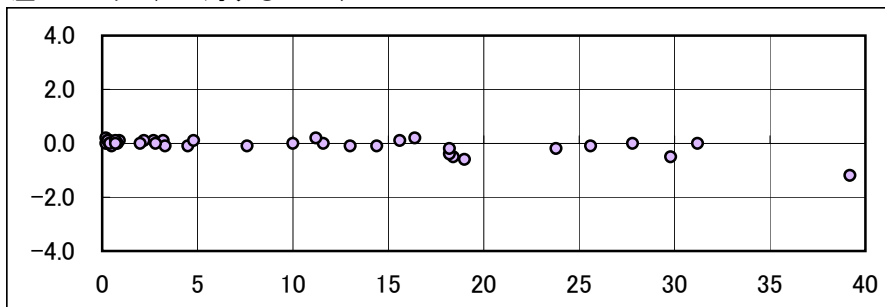

散布図

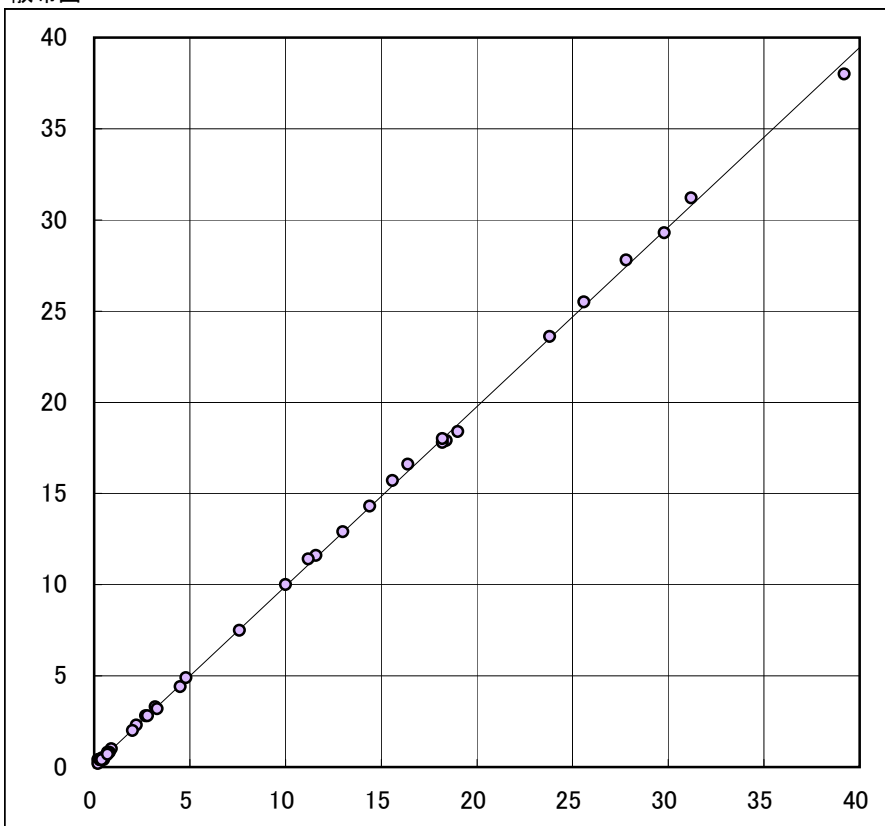

試料	血清
----	----

X軸	
装置	日立自動分析装置
メーカー	A社
項目	T-BIL
試薬名	-
単位	mg/dL

Y軸	
装置	日立クリニカルアナライザー
メーカー	日立化成工業(株)
項目	T-BIL
試薬名	セラテストム BIL
単位	mg/dL

n = 42

r = 1.000

Y = aX + b
 傾き a 0.985 切片 b 0.077

X平均 = 9.15

Y平均 = 9.09

Sy·x = 0.197

式選択 直線回帰式

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	0.2	0.4	4.5	4.4	31.2	31.2				
2	0.3	0.3	0.7	0.7	27.8	27.8				
3	0.5	0.5	2.8	2.8						
4	0.6	0.6	4.8	4.9						
5	0.2	0.2	11.6	11.6						
6	0.7	0.7	16.4	16.6						
7	0.9	1.0	19.0	18.4						
8	0.4	0.5	23.8	23.6						
9	0.3	0.4	39.2	38.0						
10	0.3	0.4	18.4	17.9						
11	0.4	0.4	7.6	7.5						
12	2.7	2.8	10.0	10.0						
13	0.5	0.4	11.2	11.4						
14	0.8	0.8	13.0	12.9						
15	3.2	3.3	14.4	14.3						
16	0.4	0.4	15.6	15.7						
17	2.2	2.3	18.2	17.8						
18	0.7	0.8	18.2	18.0						
19	3.3	3.2	25.6	25.5						
20	2.0	2.0	29.8	29.3						

備考