


GLU相関性


セラテストム/大型機相関

項目 : **GLU**
 装置 : 日立クリニカルアナライザー
 試薬名 : セラテストム GLU
 単位 : mg/dL

差のプロット(Xに対するY-X)

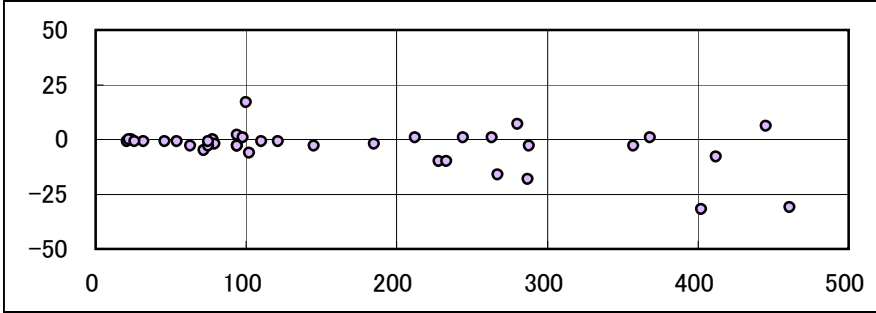

散布図

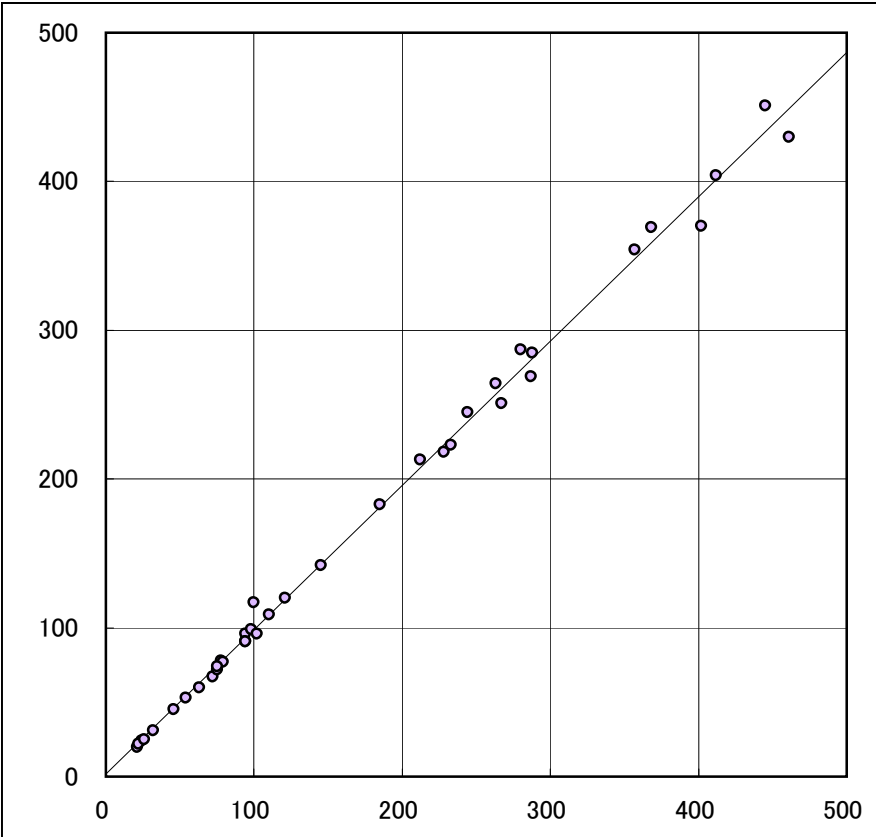

試料 血清

X軸	
装置	日立自動分析装置
メーカー	A社
項目	GLU
試薬名	-
単位	mg/dL

Y軸	
装置	日立クリニカルアナライザー
メーカー	日立化成工業(株)
項目	GLU
試薬名	セラテストム GLU
単位	mg/dL

n = **38**

r = **0.998**

Y = aX + b
 傾き a **0.970** 切片 b **1.682**

X平均 = **172.6**

Y平均 = **169.1**

Sy·x = **8.02**

式選択 直線回帰式

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	228	218	21	20						
2	100	117	22	22						
3	280	287	26	25						
4	288	285	287	269						
5	244	245	402	370						
6	368	369	461	430						
7	267	251	445	451						
8	185	183	412	404						
9	110	109	98	99						
10	94	96	212	213						
11	94	91	75	74						
12	72	67	263	264						
13	145	142	94	91						
14	78	78	233	223						
15	79	77	63	60						
16	75	72	121	120						
17	24	24	357	354						
18	32	31	102	96						
19	46	45								
20	54	53								

備考