


相関性


セラテストム/大型機相関

項目 : ALB
 装置 : 日立クリニカルアナライザー
 試薬名 : セラテストム ALB
 単位 : g/dL

差のプロット(Xに対するY-X)

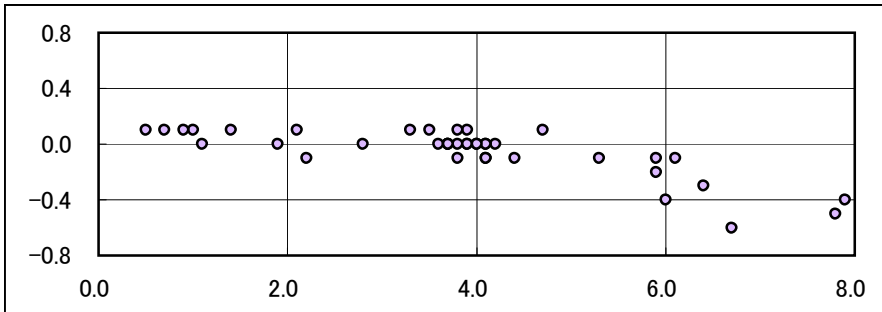

散布図

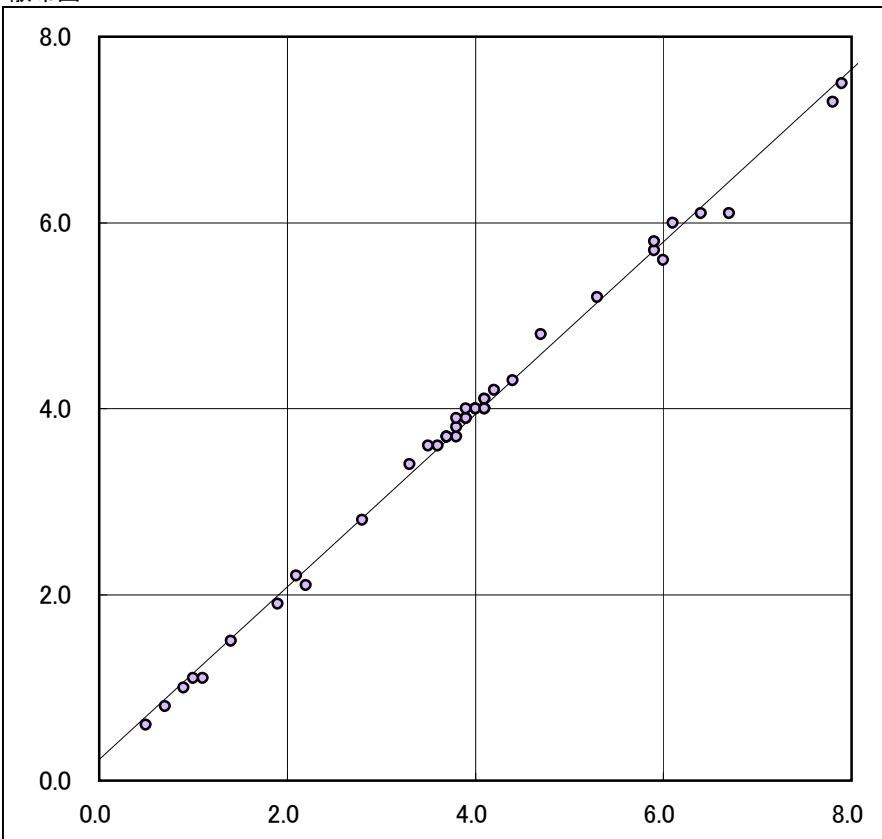

試料 血清

X軸	
装置	日立自動分析装置
メーカー	A社
項目	ALB
試薬名	-
単位	g/dL

Y軸	
装置	日立クリニカルアナライザー
メーカー	日立化成工業(株)
項目	ALB
試薬名	セラテストム ALB
単位	g/dL

n = 40

r = 0.998

Y = aX + b
 傾き a 0.928 切片 b 0.227

X平均 = 3.87

Y平均 = 3.82

Sy·x = 0.110

式選択 直線回帰式

備考

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	6.1	6.0	3.8	3.9						
2	4.7	4.8	3.7	3.7						
3	3.7	3.7	2.1	2.2						
4	4.4	4.3	2.2	2.1						
5	4.2	4.2	1.1	1.1						
6	3.8	3.7	1.4	1.5						
7	4.0	4.0	1.9	1.9						
8	4.1	4.0	2.8	2.8						
9	3.9	3.9	0.7	0.8						
10	3.3	3.4	0.5	0.6						
11	3.8	3.8	1.0	1.1						
12	4.1	4.1	0.9	1.0						
13	3.5	3.6	7.9	7.5						
14	3.9	3.9	7.8	7.3						
15	4.1	4.1	5.9	5.7						
16	4.0	4.0	6.7	6.1						
17	3.6	3.6	6.0	5.6						
18	4.1	4.0	5.9	5.8						
19	3.9	4.0	6.4	6.1						
20	3.7	3.7	5.3	5.2						