


相関性


セラテストム/大型機相関

項目 : IP
 装置 : 日立臨床分析装置
 試薬名 : セラテストム IP
 単位 : mg/dL

差のプロット(Xに対するY-X)

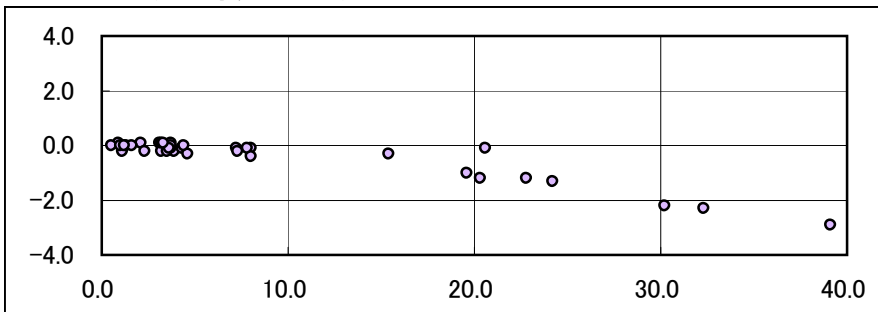

散布図

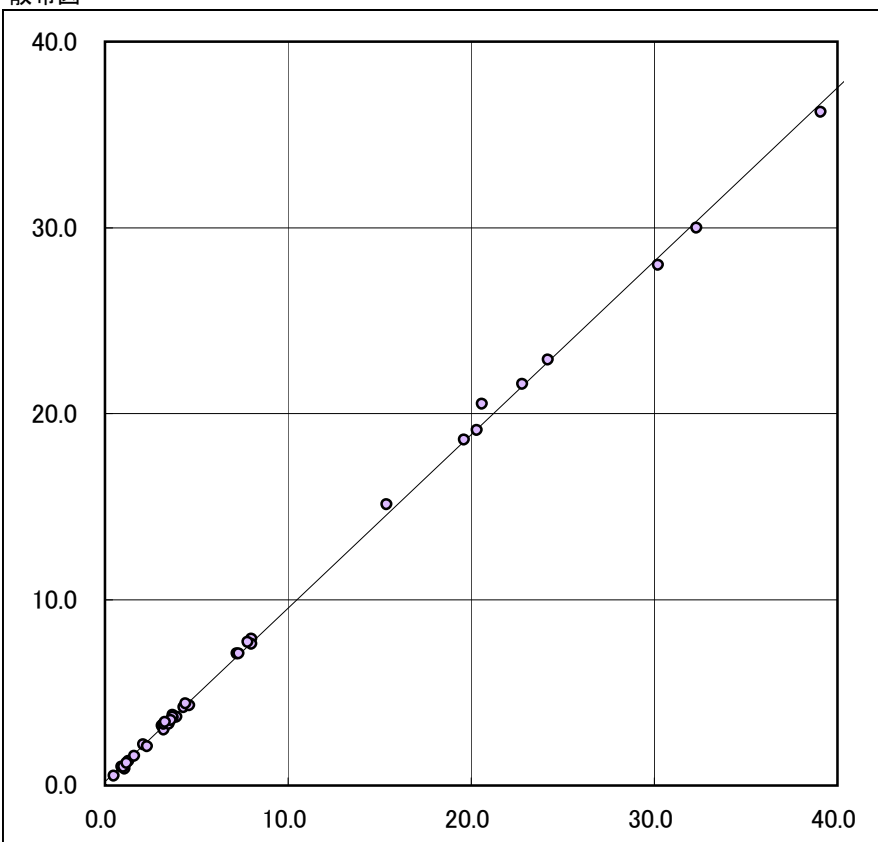

試料 血清

X軸	
装置	日立自動分析装置
メーカー	B社
項目	IP
試薬名	-
単位	mg/dL

Y軸	
装置	日立臨床分析装置
メーカー	日立化成工業(株)
項目	IP
試薬名	セラテストム IP
単位	mg/dL

n = 37

r = 1.000

Y = aX + b
 傾き a 0.933 切片 b 0.201

X平均 = 8.82

Y平均 = 8.43

Sy·x = 0.272

式選択 直線回帰式

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	3.7	3.8	3.7	3.7						
2	7.2	7.1	3.1	3.2						
3	3.9	3.7	3.5	3.4						
4	8.0	7.9	3.2	3.0						
5	4.3	4.2	3.2	3.3						
6	8.0	7.6	3.5	3.3						
7	3.7	3.6	3.6	3.5						
8	4.6	4.3	3.3	3.4						
9	2.1	2.2	20.3	19.1						
10	4.4	4.4	20.6	20.5						
11	7.3	7.1	19.6	18.6						
12	7.8	7.7	15.4	15.1						
13	2.3	2.1	32.3	30.0						
14	1.1	0.9	30.2	28.0						
15	1.3	1.3	24.2	22.9						
16	1.6	1.6	22.8	21.6						
17	0.9	1.0	39.1	36.2						
18	0.5	0.5								
19	1.0	1.0								
20	1.2	1.2								

備考