


相関性


セラテストム/大型機相関

項目 : HDL-C
 装置 : 日立クリニカルアナライザー
 試薬名 : セラテストム HDL
 単位 : mg/dL

差のプロット(Xに対するY-X)

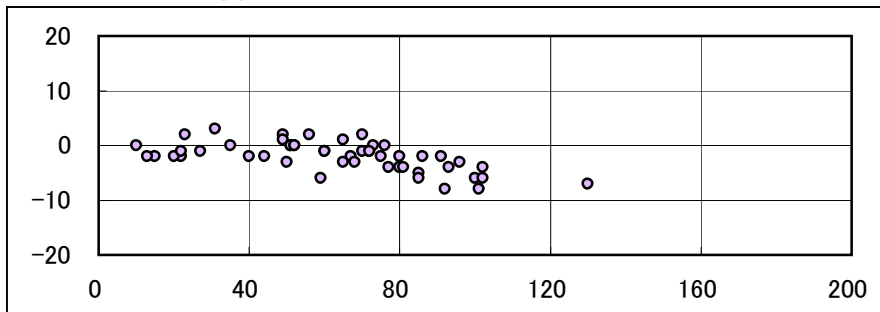

散布図

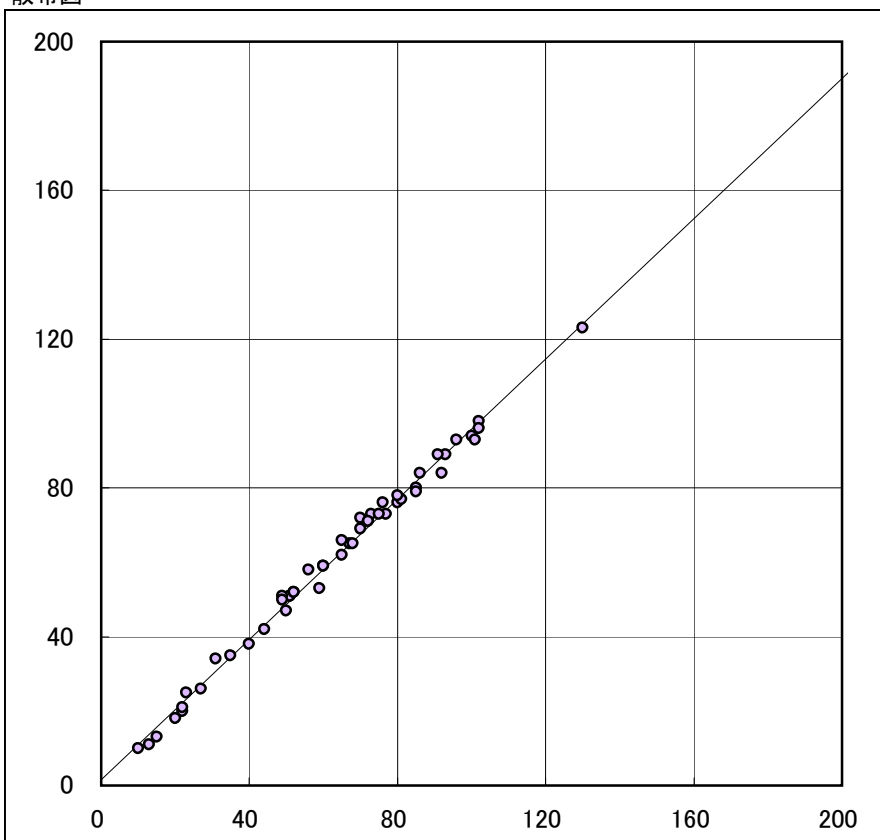

試料 血清

X軸	
装置	日立自動分析装置
メーカー	C社
項目	HDL-C
試薬名	-
単位	mg/dL

Y軸	
装置	日立クリニカルアナライザー
メーカー	日立化成工業(株)
項目	HDL-C
試薬名	セラテストム HDL
単位	mg/dL

n = 50

r = 0.997

Y = aX + b
 傾き a 0.942 切片 b 1.617

X平均 = 62.9

Y平均 = 60.9

Sy·x = 2.13

式選択 直線回帰式

	1~20		21~40		41~60		61~80		81~100	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	102	98	70	72	73	73				
2	86	84	80	76	65	66				
3	51	51	130	123	60	59				
4	51	51	77	73	75	73				
5	93	89	35	35	102	96				
6	72	71	70	69	85	79				
7	49	51	101	93	72	71				
8	52	52	52	52	49	50				
9	67	65	85	80	91	89				
10	100	94	68	65	96	93				
11	65	62	81	77						
12	40	38	76	76						
13	44	42	15	13						
14	31	34	13	11						
15	22	20	23	25						
16	20	18	27	26						
17	22	21	92	84						
18	10	10	60	59						
19	59	53	56	58						
20	50	47	80	78						

備考