

プロトロンビン時間キット「コアグピア® PT-Liquid」 発売のお知らせ

2019年5月17日
積水メディカル株式会社

積水メディカル株式会社（代表取締役社長：久保 肇、本社：東京都中央区、以下積水メディカル）は、プロトロンビン時間キット「コアグピア® PT-Liquid」を5月17日に発売しました。

「コアグピア® PT-Liquid」は、血漿のプロトロンビン時間(PT)の測定を使用目的とした体外用診断用医薬品です。本品は凝固時間法を測定原理とし、血液凝固分析装置「コアプレスタ®2000」、血液凝固自動分析装置「CP3000™」で使用が可能です。本品は液状試薬であり、2010年より販売しております「コアグピア® PT-N」で必要であった試薬溶解操作が不要です。液状試薬とすることで、操作性の向上と、試薬の溶解誤差やヒューマンエラーを防ぐことが可能となります。

積水メディカルは検査事業において血液凝固を重点領域の一つとして定め、検査試薬に加え血液凝固分析装置の販売を開始し、シェアを伸ばしてまいりました。

今後とも検査試薬及び分析装置をトータルシステムとして提供することで、臨床検査に貢献してまいります。

1. 臨床的意義

主に、外因系凝固機能異常による各種疾患の診断補助等に使用されます。
また、経口抗凝固剤療法のモニタリングに使用されることがあります。

2. 製品概要

製品名 : コアグピア® PT-Liquid
使用目的 : 血漿のプロトロンビン時間の測定
測定原理 : 凝固時間法
測定範囲 : 5~130% (血液凝固自動分析装置「CP3000™」による)
検体種 : 血漿(クエン酸血漿)

包装・価格 :

品名	包装	希望納入価格 (税抜)
コアグピア® PT-Liquid	4mL × 10	12,000円
	10mL × 10	25,000円

別売品※

品名・包装・価格 :

品名	包装	希望納入価格 (税抜)
コアグピア® 用 キャリブレーター-N*	1mL用 × 10	11,500円
コアグピア® 用 コントロールP-N*	1mL用 × 2濃度 × 5	9,900円
コアグピア® Fbg検体希釈液	10mL × 10	4,000円

※本品は体外診断用医薬品ではありません。


3. 特長

調製不要の液状試薬

ISI (国際感度指数) ≒1.0

オンボード安定性は2週間

4. 製品写真

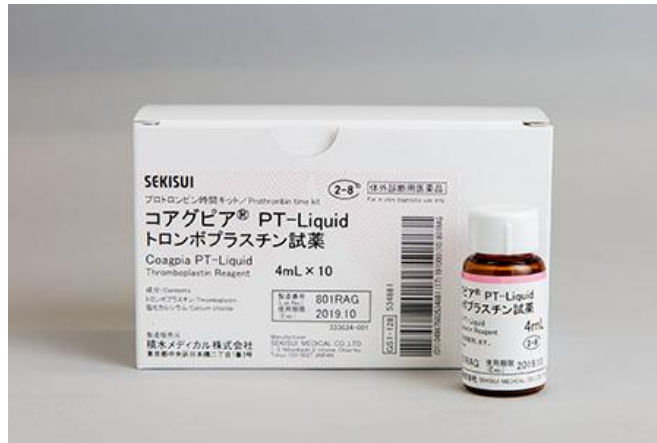

「コアグピア®」は積水メディカル株式会社の登録商標です。

本件についてのお問い合わせ先

積水メディカル株式会社

経営統括部経営企画部総務グループ TEL : 03-3272-0672

検査事業統括部コアグレーション事業部 TEL : 03-3272-1969